

MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRATE



MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRATE

Ansell

GAMMEX LATEX

Domeniu de utilizare:


- chirurgie generală.

Specificații:

- latex natural, căptușit la interior cu poliuretan;
- lungime = 290 mm;
- manșetă dreaptă cu bandă adezivă;
- măsuri 5,5 - 9.

DERMASHIELD™ Donning Aid Technology

DERMASHIELD™ Technology is a proprietary inner coating for fast and easy damp or dry hand donning whether it is the first don or during intraoperative changes.

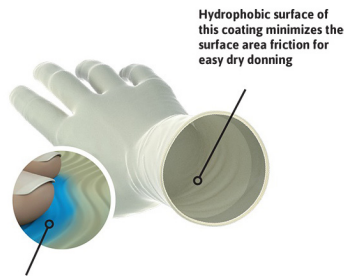

Hydrophilic lubricants in the coating are activated upon contact with wet or damp hands to facilitate damp donning and help minimize the feel of sweaty hands



MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRATE

Ansell

GAMMEX LATEX SENSITIVE

Domeniu de utilizare:

- microchirurgie;
- chirurgie plastică și reparatorie.


Specificații:

- latex natural;
- strat de latex cu 25% mai subțire;
- culoare maro pentru reducerea efectului negativ al reflexiei;
- lungime = 285 mm;
- măsuri 5,5 - 9.

 **A.R.T.**TM
Pinhole Barrier Technology

A.R.T.TM Technology is a proprietary process integrated into the manufacturing line that helps add an extra level of robustness by minimizing possible defects that may later result in pinholes.

A coating is applied over the glove former to seal any micro-defects, creating a smooth finish and delivering a consistent thickness across the glove. This minimizes irregularities that may later result in pinholes

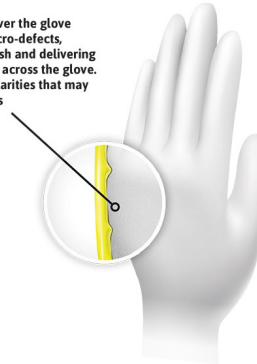

MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRATE

Ansell

GAMMEX LATEX GLOVE-IN-GLOVE SYSTEM

Domeniu de utilizare:

- procedurile chirurgicale cu risc ridicat în ortopedie, traumatologie și chirurgie cardiacă;
- protecție specială în intervenții la pacienți cu hepatita, HIV și intervenții de urgență;
- îmbrăcare rapidă în caz de mănuși duble.

Specificații:

- latex natural;
- pachet cu 2 perechi de mănuși preîmbrăcate (interior verde, exterior crem);
- lungime = 302 mm;
- măști 5,5 - 9.




A.R.T.TM

Pinhole Barrier Technology

A.R.T.TM Technology is a proprietary process integrated into the manufacturing line that helps add an extra level of robustness by minimizing possible defects that may later result in pinholes.

A coating is applied over the glove former to seal any micro-defects, creating a smooth finish and delivering a consistent thickness across the glove. This minimizes irregularities that may later result in pinholes

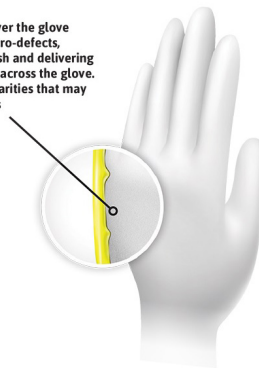

MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRATE

Ansell

GAMMEX LATEX MOISTURIZING

Domeniu de utilizare:


- în cazurile de sensibilitate/ descuamare tegumentară;
- asigură menținerea umezelii și rehidratarea pielii.

Specificații:

- latex natural;
- manșetă dreaptă cu bandă adezivă;
- suprafață internă hidratată cu tehnologie Hydrasoft;
- lungime = 290 mm;
- măsuri 5,5 - 9.

HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology

HYDRASOFT™ Technology is an odorless, water-based coating applied on the inside of the glove that helps retain moisture and rehydrate dry skin to improve the wearers' skin condition.

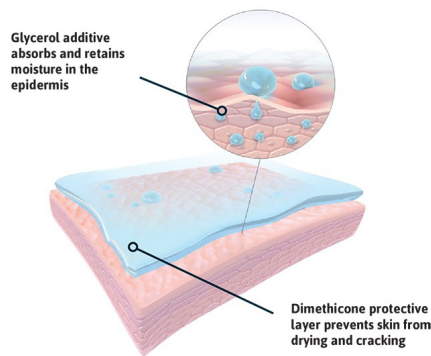

MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRATE

Ansell

GAMMEX POWDER-FREE WITH AMT

Domeniu de utilizare:


- protecție antivirală și antibacteriană rapidă chiar și atunci când apare o breșă în mănușă.

Specificații:

- latex natural;
- manșetă dreaptă, cu bandă adezivă;
- captușită cu poliuretan și acoperire antimicrobiană pe bază de gluconat de Clorhexidină;
- lungime 290 mm;
- măsuri 5,5 - 9.



AMT™ Technology enables the use of chlorhexidine gluconate (CHG) on the inside of the glove to suppress the regrowth of bacteria on hands and prevent bacterial and viral migration in the event of a glove breach.

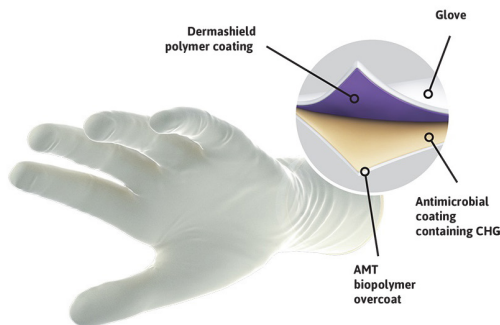

MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRATE

Ansell

GAMMEX NON-LATEX

Domeniu de utilizare:

- alergie la cauciuc natural;
- pediatrie.


Specificații:

- material: neopren;
- culoare verde;
- manșetă dreaptă, cu bandă adezivă;
- lungime = 305 mm;
- măsuri 5,5 - 9.



DERMASHIELD™
Donning Aid Technology

DERMASHIELD™ Technology is a proprietary inner coating for fast and easy damp or dry hand donning whether it is the first don or during intraoperative changes.

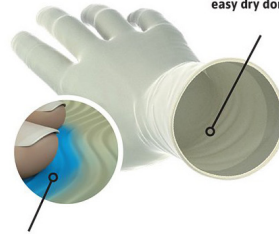

Hydrophilic lubricants in the coating are activated upon contact with wet or damp hands to facilitate damp donning and help minimize the feel of sweaty hands



MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRATE

Ansell

ENCORE LATEX ORTHO

Domeniu de utilizare:

- chirurgie ortopedică, traumatologie

Specificații:

- latex natural;
- culoare maro;
- strat de latex cu 50% mai gros;
- manșetă cu bandă adezivă;
- lungime = 295 mm;
- măsuri 6 - 9.




DERMASHIELD™

Donning Aid Technology

DERMASHIELD™ Technology is a proprietary inner coating for fast and easy damp or dry hand donning whether it is the first don or during intraoperative changes.

Hydrophobic surface of this coating minimizes the surface area friction for easy dry donning

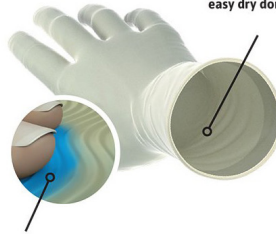

Hydrophilic lubricants in the coating are activated upon contact with wet or damp hands to facilitate damp donning and help minimize the feel of sweaty hands

